## Компрессионная система SCD ЭКСПРЕСС принадлежностями

Установленное время цикла (компрессия 11 секунд, время декомпрессии автоматически определя-

ется прибором для каждого пациента индивидуально в зависимости от скорости заполнения вен)

минимизирует застой крови.

Распределение давления для манжеты на стопу: давление 130 мм рт. ст (компрессия 5 секунд, время декомпрессии определяется автоматически). Новый прибор SCD Express $^{\rm TM}$ :


- 1. Полностью транспортабельный
- 2. Литиево-ионная батарея обеспечивает до 8 часов непрерывной работы
- 3. Малый размер и вес (1,6 кг)
- 4. Эргономичный дизайн
- 5. Манжеты Камбиа манжеты с отрывной секцией бедра для повышения комфорта пациента на более поздних стадиях лечения
- 6. Манжеты на стопу

3856LF

Градуированное последовательное давление поддерживается в течение всего цикла компрессии.

Распределение давления для манжеты на ногу: 45 мм рт. ст. – щиколотка, 40 мм рт. ст. – голень, 30мм рт. ст. – бедро.



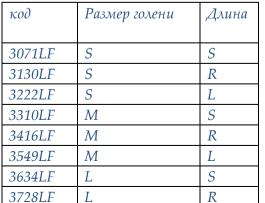



код	Размер голени	Длина
3306	XS	R
3320	XS	L
3039	S	R
3364	S	L
3144	M	R
3449	M	L
3221	L	R
3523	L	L
3922	XL	R
3995	XL	L

## 95250 Компрессионная система SCD Express $^{\rm TM}$



НАИМЕНОВАНИЕ (кол-во в упаковке)	АРТИКУЛ
Компрессионная шина до бедра, малая (5)	73011
Компрессионная шина до бедра, стандартная (5)	73012
Компрессионная шина до бедра, большая (3)	73013
Компрессионная шина до колена, универсальная (5)	73022
Компрессионная шина до колена, большая (5)	73023
Компрессионная шина на стопу, стандартная (10)	73032
Компрессионная шина на стопу, большая (10)	73033
Компрессионная шина Камбиа до бедра, стандартная (5)	73042



код	Размер голени	Длина
7071	S	R
7339	S	L
7115	M	R
7480	M	L
7203	L	R
7594	L	L
7604	XL	R
7802	XL	L